

PROTOKOL (Návod na použitie)

Anti - CD8 FITC


Kráľičia klonálna protilátka

Aplikácia: prietoková cytometria

Kat. číslo: DB 1021 (100 testov)

Informácie o produkte:

Klon:	N21-G
Špecificita:	ľudský antigén
Izotyp:	kráľičí IgG
Pufor:	20 mM fosfátový pufor, pH 7.4
Stabilizátor:	10 mg/ml BSA
Konzervačná latka:	0,05% NaN ₃
Príprava produktu:	monošpecifická protilátka bola pripravená in vitro klonálnou technológiou a konjugovaná s FITC fluorochrómom za optimálnych podmienok
Skladovanie:	+4°C, chráňte pred svetlom, nezmrazujte
Expirácia:	24 mesiacov (odo dňa odoslania)
Odporúčané riedenie:	10 µl/test

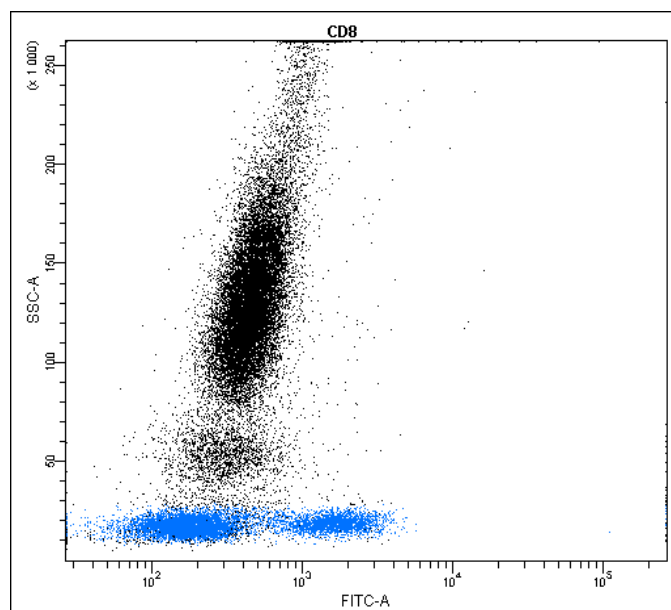

Reprezentatívny profil periférnych lymfocytov ľudskej krvi analyzovaný prietokovou cytometriou, BD FACSCanto II.

Ľudské lymfocyty periférnej krvi boli značené anti-CD8 FITC protilátkou (10 µl/test).

Poznámky

Táto protilátka detekuje povrchový antigén.

Riedenie podľa testovania zákazníka.

Pre optimálny výsledok použite 0,5-1×10⁶ buniek v 100 µl vzorke (test).

Tento produkt je určený len pre použitie in vitro, a pre vedecké a diagnostické účely.

Upozornenie: produkt obsahuje azid sodný.