

## Anti - c-FOS

### Králičia klonálna protilátka

#### KAT. ČÍSLO

DB 292-0.05 (50 µl)  
 DB 292-0.1 (100 µl)

#### INFORMÁCIE O PRODUKTE


<b>Klon:</b>	I24-V	<b>Pufor:</b>	20 mM Tris-HCl, pH 8.0
<b>Uniprot číslo:</b>	Human: P01100; Mouse: P01101; Rat: P12841	<b>Stabilizátor:</b>	10 mg/ml BSA
<b>Popis produktu:</b>	Králičie anti-c-FOS klonálne IgG	<b>Konzervačná látka:</b>	0.05% NaN <sub>3</sub>
<b>Informácie o produkte:</b>	Klon králičích imunoglobulínov odpovedajúcich majoritnému epitopu imunogénnemu peptidu	<b>Skladovanie:</b>	10 µl produktu pri -20 °C
<b>Imunogén:</b>	Peptid derivovaný z internej sekvencie ľudského c-FOS. Protilátka rozoznáva epitop medzi Leu197 – Leu210.	<b>Manipulácia:</b>	Vyhňte sa opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu
<b>Špecifita:</b>	Ľudský antigén, myšací antigén, potkaní antigén	<b>Expirácia:</b>	24 mesiacov odo dňa odoslania
		<b>Aplikácia:</b>	Western blot, ELISA
		<b>Riedenie:</b>	Western blotting – 1:1 000; ELISA – 1:20 000

#### WESTERN BLOT (WB) PROTOKOL - NÁVOD NA POUŽITIE

##### Roztoky pre Western blotting:

- Premývací pufo: 1x Tris Bufferd Saline (TBS); 0,1% Triton X-100
- Blokovací pufo: 1x TBS; 0,1% Triton X-100; 5% sušené mlieko

**Pre Western blot:** inkubácia membrány 2 hodiny pri izbovej teplote s protilátkou rozpustenou v blokovacom pufrí.

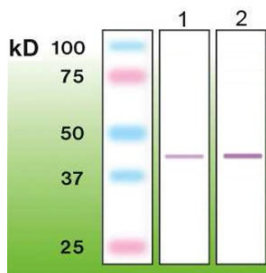

##### Anti - c-FOS (DB 292)

Western blot c-FOS: dráha 1 – 0.5 µg; dráha 2 – 1 µg ľudského rekombinantu c-FOS (OriGeneTP760 257).

#### UPOZORNENIA

1. Reagencia je určená pre profesionálnu In vitro diagnostiku v laboratóriách.
2. Nepoužívajte reagentiu po uplynutí doby použiteľnosti.
3. Chráňte obsah fľaštičky pred kontamináciou.
4. Akákoľvek odchýlka od odporúčaných postupov uvedených v pracovnom protokole môže mať vplyv na konečné výsledky.
5. Reagencia obsahuje azid sodný (NaN<sub>3</sub>), ktorý je toxický pri **vyšších koncentráciách**, avšak koncentrácia prítomná v tejto reagentii (0,05%) nie je považovaná za nebezpečnú.
6. Likvidácia odpadového materiálu sa musí vykonať podľa platných miestnych predpisov.
7. Používajte pri práci ochranné prostriedky a vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.