

Anti - TRYPSIN

Kráľičia klonálna protilátka

KAT. ČÍSLO

DB 022-0.05 (50 µl)
DB 022-0.1 (100 µl)

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Klon: A16-N
Uniprot číslo: P07477
Popis produktu: Kráľičie anti-trypsin klonálne IgG

Informácie o produkte: Klon kráľičích imunoglobulínov odpovedajúcich majoritnému epitopu imunogénnemu peptidu

Imunogén: Peptid derivovaný z N-koncovkej sekvencie ľudského kationického trypsinu z pankreasu. Protilátka rozpoznáva epitop medzi Lys92 - Ans106.

Špecificita: Ľudský antigén

Pufor: 20 mM Tris-HCl, pH 8.0
Stabilizátor: 10 mg/ml BSA
Konzervačná látka: 0.05% NaN₃

Skladovanie: 10 µl produktu pri -20 °C
Manipulácia: Vyhnite sa opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu
Expirácia: 24 mesiacov odo dňa odoslania


Aplikácia: Western blot, ELISA
Riedenie: Western blotting – 1:4 000;
ELISA – 1:20 000-1:50 000

WESTERN BLOT (WB) PROTOKOL - NÁVOD NA POUŽITIE

Roztoky pre Western blotting:

- Premývací pufor: 1x Tris Buffered Saline (TBS); 0,2% Tween-20
- Blokovací pufor: 1x TBS; 0,2% Tween-20; 8% sušené mlieko

Pre Western blot: inkubácia membrány 2 hodiny pri izbovej teplote s protilátkou rozpustenou v blokovacom puffi.

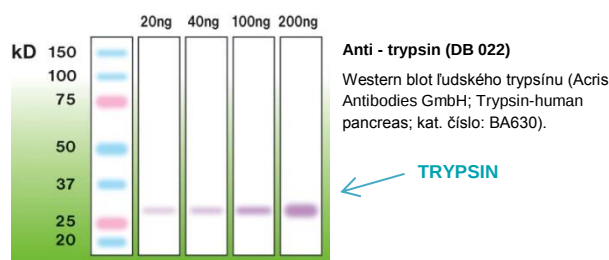

UPOZORNENIA

1. Reagencia je určená pre profesionálnu In vitro diagnostiku v laboratóriách.
2. Nepoužívajte reagentiu po uplynutí doby použiteľnosti.
3. Chráňte obsah fľaštičky pred kontamináciou.
4. Akákoľvek odchýlka od odporúčaných postupov uvedených v pracovnom protokole môže mať vplyv na konečné výsledky.
5. Reagencia obsahuje azid sodný (NaN₃), ktorý je toxický pri vyšších koncentráciách, avšak koncentrácia prítomná v tejto reagentii (0,05%) nie je považovaná za nebezpečnú.
6. Likvidácia odpadového materiálu sa musí vykonať podľa platných miestnych predpisov.
7. Používajte pri práci ochranné prostriedky a vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.